

IL PRELIEVO PER EMOCOLTURA

OBIETTIVO: lavorare in asepsi ed evitare le contaminazioni



Advancing Blood Culture


1 PREPARAZIONE DEL SITO DI PRELIEVO

- ☛ Lavare le mani e indossare i guanti (preferibilmente sterili)
- ☛ Utilizzare **Chlorexidina 2% in soluzione alcolica** al 70% (preferibilmente monouso sterile)
- ☛ Eseguire la disinfezione del sito di prelievo (30 secondi) e lasciare asciugare (30 secondi)



2 PREPARAZIONE DEI FLACONI

- ☛ Utilizzare il set completo:
flacone **AEROBIO** (ghiera blu)
+ flacone **ANAEROBIO** (ghiera oro o viola)

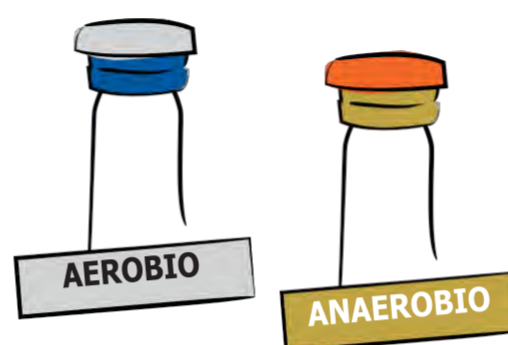

3 RIMUOVERE I TAPPINI

- ☛ Rimuovere i tappini e disinfettare il setto con antisettico (**NON usare soluzione iodata** sui flaconi)



4 VOLUME DI INOCULO

- ☛ Evidenziare il volume da prelevare segnando con pennarello rosso la 2ª tacca dal brodo (10 ml)
In caso di bambini 1-4 ml, non oltre il 4,5% del peso totale



5 IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

- ☛ Identificare i flaconi con etichetta corrispondente
- ☛ **NON** applicare etichetta del paziente sul codice a barre del flacone o sullo spazio libero (zona tacche volume)
- ☛ **NON** scrivere sul codice a barre



6 RACCOLTA DEL CAMPIONE E INVIO

- ☛ Inoculare prima il flacone aerobio, poi quello anaerobio, mantenendo i flaconi in verticale per controllare il riempimento. In totale si inoculano 4-6 flaconi in rapida successione
- ☛ Inviare **SUBITO** in laboratorio Entro 24h

